

DUEL



DUEL ist ein leichter High-Level-Desinfektionsschaum im Taschenformat, welcher eine sporizide Routinesdesinfektion erlaubt.

DUEL entfaltet seine sporizide Wirkung nachweislich innerhalb von 1 Minute und ist damit das schnellste derzeit erhältliche High-Level-Desinfektionsmittel für Oberflächen.

DUEL eignet sich für die sporizide High-Level-Desinfektion häufig berührter Oberflächen nicht-invasiver Medizinprodukte in Patientenzimmern, auf Intensiv- und Isolierstationen, in Operationssälen oder auf onkologischen und Neugeborenenstationen.



DUEL IST SPORIZID, MYKOBAKTERIZID, VIRUZID, FUNGIZID UND BAKTERIZID.

Ein Desinfektionsmittel ist besonders wirksam, wenn die Einwirkzeit - also die Zeit, in welcher eine Wirksamkeit belegt wurde - kürzer ist, als die Zeit in der die Fläche trocknet. DUEL wirkt innerhalb von 1 Minute gegen alle in den Europäischen Normen zur Flächendesinfektion geforderten Mikroorganismen und weitere relevante Keime, wie z.B.:

- *Clostridium difficile*
- *Escherichia coli*
- *Candida auris*
- *Mycobacterium terrae*
- Norovirus
- Influenza-A-Virus (H1N1)
- Hepatitis-B-Virus
- Humanes Immundefizienz-Virus (HIV)
- *Aspergillus brasiliensis*
- Carbapenem-resistente *Klebsiella pneumoniae* (CRKP)
- Methicillin-resistente *Staphylococcus aureus* (MRSA)
- Vancomycin-resistente *Enterococcus faecium* (VREfm)

Damit bietet DUEL Praxistauglichkeit ohne Wartezeiten. Kleine Flächen können auf höchstmöglichem Niveau desinfiziert werden, was zur Risikominimierung bei unbekanntem Infektionsrisiko beiträgt.

PRÜFBERICHTE:

BAKTERIEN	EN 13727
	EN 14561
	EN 16615
	VAH 2015
HEFEN/PILZE	EN 13624
	EN 14562
	EN 16615
	VAH 2015
VIREN	EN 14476
	DVV/RKI (2014)
	DVV 2012
	EN 16615
MYKOBAKTERIEN	EN 14348
	EN 14563
SPOREN	EN 13704
	EN 17126

cache™

TRISTEL'S CLEANING AND DISINFECTION BRAND FOR HOSPITAL SURFACES

MIT DER KRAFT VON **CHLORDIOXID**

DUEL nutzt eine proprietäre Technologie auf Basis von Chlordioxid (ClO_2), ein umfassend dokumentiertes und hochwirksames Biozid. Chlordioxid verhindert nachweislich die Bildung eines Biofilms und befreit Oberflächen effektiv davon.


DUEL ist viel leistungsfähiger als Oberflächenreiniger und -desinfektionsmittel, die auf Natriumhypochlorid, Chlortabletten, quartären Ammoniumverbindungen, Phenolen oder Aldehyden basieren.

DUEL IST **TRAGBAR**

Eine Flasche DUEL wiegt lediglich 350g.

DUEL ist leicht und transportabel und daher einsetzbar, wo immer es benötigt wird.

DUEL wurde speziell für die High-Level-Desinfektion häufig berührter Oberflächen nicht-invasiver Medizinprodukte in Patientenzimmern entwickelt.

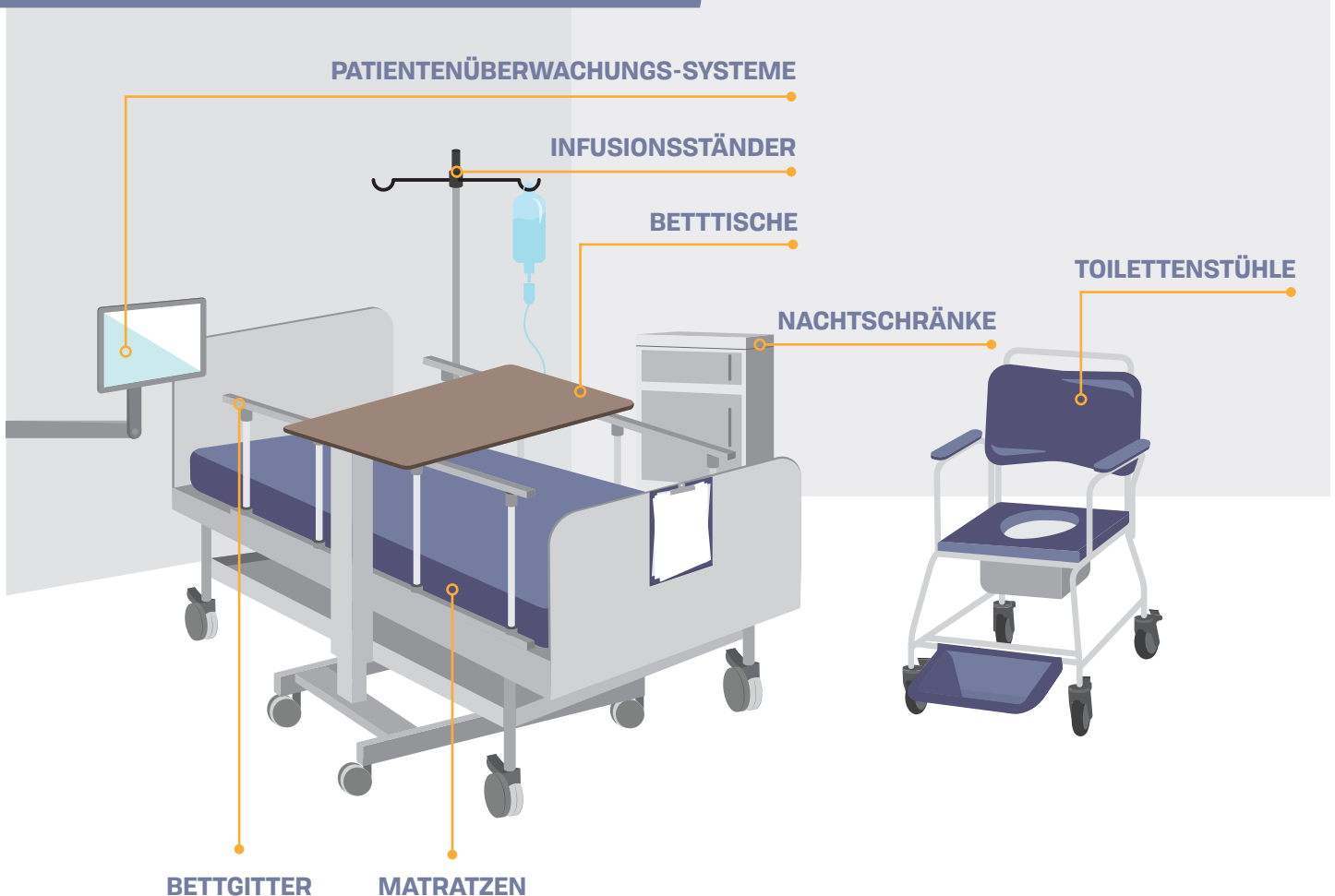

AB SOFORT BESTELLBAR!

6 x 250ml DUEL pro Karton
(310 Hübe/Schaumspender)
DUO/SUR1

